



**Elevatore di soluzione
infusionale per terapia infusionale
ad elevazione manuale.**

**IQI
77**

**IQT
91**

- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza, Ambulatori, Domicilio Paziente
- Altezza massima del supporto infusione: **2800 mm**
- Portata massima del dispositivo: **10 Kg**
- Supporto Infusioni **rotante** a 4 ganci di sicurezza in **Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)**
- Struttura verticale telescopica in **Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)**
- Basamento 5 razze in **Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)**



SA.F.E. Tech.

**Efficacia
IQP 70,3**

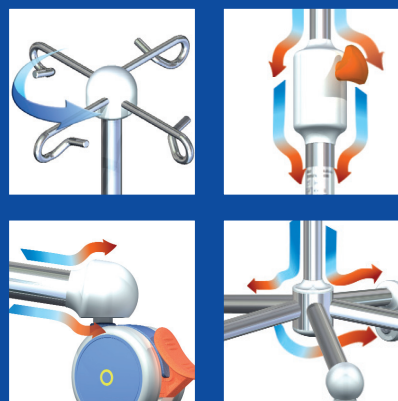
**Sanificabilità
IQP 76,7**



**Usabilità
IQP 79,1**

**Versatilità
IQP 83,3**

**Compatibilità Sistemica
IQP 71,0**

**Compatibilità Ambientale
IQP 100**



Proprietà del Dispositivo	Rif. Caratteristica Tecnico-Funzionale	Caratteristiche del Dispositivo						IQc	
Versatilità	6.2.1	Ambiente di destinazione	Domicilio	Ambulatorio Medico	Degenza	R.I.M.N.	Terapia Intensiva	Reparto Operatorio	83,33
			OK	OK	OK		OK	OK	
Efficacia	6.1.2	Altezza massima del Supporto Soluzione Infusionale (Hsi Max) (+50 / -0)	2800			mm			98,94
Efficacia	6.1.1	Portata Massima (Soluzione Infusionale) (Kg)	Portata Max Dispositivo (M)	10	Portata singolo Gancio		2,5	41,67	
Compatibilità Sistemica	6.5.5	Pompe Infusionali (Peso ammissibile)	fino a 5 Kg (Asta Strutturale)			fino a 10 Kg (HID-ACS09)			50,00
Usabilità / Sanificabilità	6.3.1 6.4.1	Regolazione Altezza del Supporto Soluzione Infusionale	Manuale, con morsetto a frizione e vite di sicurezza						60,00
Sanificabilità	6.3.1	Supporto Soluzione Infusionale	Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)						100,00
Usabilità	6.4.2		N°4 Ganci anti caduta accidentale delle Soluzioni (Ø8)						100,00
Usabilità	6.4.2		Resistenza meccanica singolo Gancio (Kg)					8	100,00
Usabilità	6.4.2		Rotante						90,00
Usabilità	6.4.5		Ergonomia-Aggancio Soluzioni Infusionali (Metodo Niosh)	(Hsi Min) Altezza di carico Soluzione Infusionale = 1600 mm da terra					
Sanificabilità	6.3.2	Struttura verticale telescopica (Materiali / Tech. / Dimensioni)	Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) (Ø28 / Ø20) Morsetto SA.F.E. Technology						100,00
Sanificabilità	6.3.2	Ergonomia-Basamento (Inciampo)	Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) Raccordi e Razze SA.F.E. Technology						100,00
Usabilità	6.4.5		N°5 razze						70,00
Usabilità	6.4.4	Maneggevolezza del Dispositivo (al Max della Portata)	N°5 ruote gemellate Ø 75 mm		N°2 con Freno			53,84	
Sanificabilità	6.3.3	Vincoli a Terra							0,00
Sanificabilità	6.3.4	Procedura di sanificazione ammessa	Manuale/Vapore/Nebulizzazione/Termodisinfettore						100,00
Compatibilità Sistemica	6.5.1	Dimensioni e geometrie [mm] Peso [Kg]	Ø 606 x 1727/2800H			5,5 Kg			63,37
Usabilità	6.4.5	Indice di stabilità (Rst Max) <small>(forza da applicare alla base del dispositivo per determinarne il ribaltamento)</small>	6,07			Kg			38,30
Usabilità	6.4.3	Dispositivo per discesa rallentata del Supporto Soluzione Infusionale	SI						100,00
Compatibilità Sistemica	6.5.2	Dispositivi per: Conducibilità cariche elettrostatiche a Terra	Applicati						100,00
Compatibilità Sistemica	6.5.3	Insensibilità ai campi magnetici da RMN	NO						40,00
Compatibilità Sistemica	6.5.4	Colorazioni Disponibili, Identificazione , Design	Opzione disponibile						80,00
Compatibilità Ambientale	6.6	Resistenza al fuoco/ Latex free / Riciclabile	100%	100%	100%			100,00	
Compatibilità Sistemica	6.5.6	Accessori disponibili della serie HID-ACS.....	0-i-1-2-3-4-5-6-7-8-(9 o 10)-SQ-KD						92,86
Durata nel tempo	6.7	Opzione Garanzia (vedi conferma su offerta economica)	10			Anni			
		Dispositivo medico	Conformità 93/42 CEE / Classe 1 						
Indicatori di Qualità della Proprietà (IQP)									
	6.1		Efficacia						70,3
	6.3		Sanificabilità						76,7
	6.4		Usabilità						79,1
	6.2		Versatilità						83,3
	6.5		Compatibilità Sistemica						71,0
	6.6		Compatibilità Ambientale						100,0
	(5 x (Efficacia+Sanificabilità+Usabilità) + 1 x (Versatilità,+Comp. Sist. +Comp.Ambientale) / 18		Indicatore di Qualità Intrinseca (IQI)						77
	6.7		Indicatore di QUALITA' INTRINSECA TOTALE nel TEMPO (IQT)						91